


UTF™ Reduced Stem

Femoral Hip System



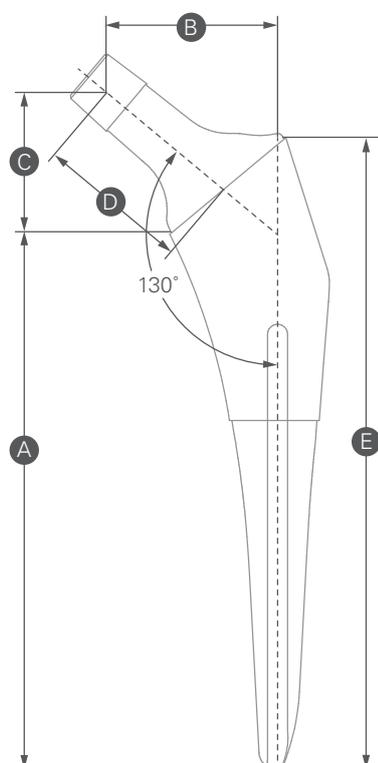

| ステムサイズ* | A 内側ステム長 | B オフセット | C ネック高さ | D ネック長 | E 外側ステム長 |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| スタンダード | | | | | |
| #00 | 95 | 32 | 25.9 | 28 | 114 |
| #0 | 100 | 32 | 26.2 | 28 | 120 |
| #1 | 105 | 32 | 26.5 | 28 | 125 |
| #2 | 107 | 33 | 27.6 | 29 | 128 |
| #3 | 110 | 34 | 28.4 | 30 | 131 |
| #4 | 113 | 35 | 29.3 | 31 | 134 |
| #5 | 116 | 36 | 30.1 | 32 | 137 |
| #6 | 118 | 37 | 31.0 | 33 | 140 |
| #7 | 120 | 38 | 31.8 | 34 | 142 |
| #8 | 122 | 39 | 32.6 | 35 | 144 |
| #9 | 123 | 39 | 32.7 | 35 | 146 |
| #10 | 126 | 41 | 34.3 | 37 | 149 |
| #11 | 128 | 42 | 35.1 | 38 | 152 |
| #12 | 131 | 43 | 36.0 | 39 | 155 |
| #13 | 133 | 44 | 36.7 | 39.5 | 158 |
| #14 | 135 | 45 | 37.2 | 40 | 161 |
| ハイオフセット | | | | | |
| #0 | 100 | 38 | 26.3 | 32 | 120 |
| #1 | 105 | 38 | 26.6 | 32 | 125 |
| #2 | 107 | 39 | 27.6 | 33 | 128 |
| #3 | 110 | 40 | 28.5 | 34 | 131 |
| #4 | 113 | 41 | 29.3 | 35 | 134 |
| #5 | 116 | 43 | 30.1 | 37 | 137 |
| #6 | 118 | 44 | 31.0 | 38 | 140 |
| #7 | 120 | 45 | 31.8 | 39 | 142 |
| #8 | 122 | 46 | 32.6 | 40 | 144 |
| #9 | 123 | 47 | 32.7 | 40 | 146 |
| #10 | 126 | 49 | 34.3 | 42 | 149 |
| #11 | 128 | 50 | 35.1 | 43 | 152 |
| #12 | 131 | 51 | 36.0 | 44 | 155 |
| #13 | 133 | 52 | 36.7 | 45 | 158 |
| #14 | 135 | 53 | 37.2 | 45.5 | 161 |

単位 :mm

オーダリングインフォメーション

カタログ番号

ステムサイズ

スタンダード



| | |
|---------------|------|
| ※ 1106 - 3099 | # 00 |
| ※ 1106 - 3000 | # 0 |
| 1106 - 3001 | # 1 |
| 1106 - 3002 | # 2 |
| 1106 - 3003 | # 3 |
| 1106 - 3004 | # 4 |
| 1106 - 3005 | # 5 |
| 1106 - 3006 | # 6 |
| 1106 - 3007 | # 7 |
| 1106 - 3008 | # 8 |
| 1106 - 3009 | # 9 |
| 1106 - 3010 | # 10 |
| 1106 - 3011 | # 11 |
| ※ 1106 - 3012 | # 12 |
| ※ 1106 - 3013 | # 13 |
| ※ 1106 - 3014 | # 14 |

※オプションとなります。

カタログ番号

ステムサイズ

ハイオフセット



| | |
|---------------|------|
| ※ 1106 - 3200 | # 0 |
| 1106 - 3201 | # 1 |
| 1106 - 3202 | # 2 |
| 1106 - 3203 | # 3 |
| 1106 - 3204 | # 4 |
| 1106 - 3205 | # 5 |
| 1106 - 3206 | # 6 |
| 1106 - 3207 | # 7 |
| 1106 - 3208 | # 8 |
| 1106 - 3209 | # 9 |
| 1106 - 3210 | # 10 |
| 1106 - 3211 | # 11 |
| ※ 1106 - 3212 | # 12 |
| ※ 1106 - 3213 | # 13 |
| ※ 1106 - 3214 | # 14 |

※オプションとなります。

UTF (United Tapered Fit) Reduced Stem –

デュアルテーパーウェッジシステムは、プライマリーの人工股関節置換術用に設計されています。UTF Reduced ステムは、骨幹端部とのフィッティングを向上するよう考慮された近位 M / L 幅が特徴的です。スリムなボディとブローチングのみのテクニックにより、骨温存が可能です。





スタンダードとハイオフセットネックオプション

- 軟部組織の緊張と関節安定性を調整できるデザイン

デュアルテーパーデザイン

- テーパーフィットコンセプトは、ステム横断面の角が皮質骨に噛み込む事により、優れた固定と軸方向の安定性および回転安定性を提供



チタンプラズマスプレーコーティング

- 生物学的固定を促進するデザイン

※ PS コーティングなしとありの骨内埋植の固定力比較で、
・埋植 4w でコーティング “あり” は “なし” の 1.86 倍、
・埋植 12w でコーティング “あり” は “なし” の 2.27 倍
の結果が得られております。

カーブドチップの先端

- ステムの挿入を容易にするようにデザインされたカーブドチップのステム遠位端

12/14 ネックテーパー

- 全ての United 社の大腿骨ヘッドと適合

インサクションホール

- クイックコネクトホルダーと
接続が可能



| ステムサイズ* | 近位幅 | 増幅 |
|---------|------|-----|
| #00 | 22.8 | — |
| #0 | 23.6 | 0.8 |
| #1 | 25.0 | 1.4 |
| #2 | 26.5 | 1.5 |
| #3 | 27.5 | 1.0 |
| #4 | 28.5 | 1.0 |
| #5 | 29.5 | 1.0 |
| #6 | 30.5 | 1.0 |
| #7 | 31.5 | 1.0 |
| #8 | 32.5 | 1.0 |
| #9 | 34.0 | 1.5 |
| #10 | 35.5 | 1.5 |
| #11 | 37.5 | 2.0 |
| #12 | 39.5 | 2.0 |
| #13 | 41.5 | 2.0 |
| #14 | 43.5 | 2.0 |

単位 :mm

近位幅

近位幅の明確化

- 使用頻度の高いサイズ領域において、近位幅 1mm で増幅し、骨幹端部に適したフィッティングを予測可能

販売名：UTF Reduced ステム
承認番号：23000BZX00194000

202602(1)R0



© 2021 United Orthopedic Japan Inc.

製造販売元

ユナイテッド・オーソペディック・ジャパン株式会社
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい5-1-2
横浜シンフォステージ ウエストタワー10階
TEL 045-620-0741 FAX 045-620-0742

UOJロジスティクスセンター  0120-16-0805

UOJロジスティクスセンター FAXナンバー 045-620-3416

販売店

