



UTS™ HA Stem

Femoral Hip System



United Tri-tapered Short (UTS) HA Stem –


MISアプローチに適したUTS HAステムは、プライマリー人工股関節置換術において、最小侵襲手術に適したトリプルテーパーウェッジシステムです。軟部組織を温存するMISの手技に対して容易にステム挿入ができるようデザインされており、術後、患者の早期離床が可能です。より短くしたステムのデザインは、インプラントの固定性に重要な本来の健康な骨を温存し、患者の解剖学的構造に基づくアライメントを矯正します。






トリプルテーパードesign

- 回旋安定性を得ることにより一次的な固定性を獲得
- 内側のカルカー近位に効果的な荷重伝達を確保

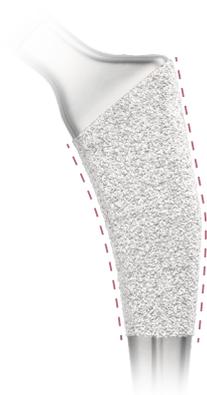


一貫した近位幅の増加

- 全てのサイズ間において、近位幅が一貫して1.5mm 増加するため、より適切なサイズのインプラント選択が可能

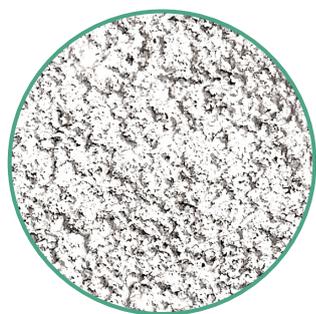

チタンプラズマスプレーコーティング

- プラズマスプレー＋ハイドロキシアパタイトコーティングは優れた Bone on-growth を促進

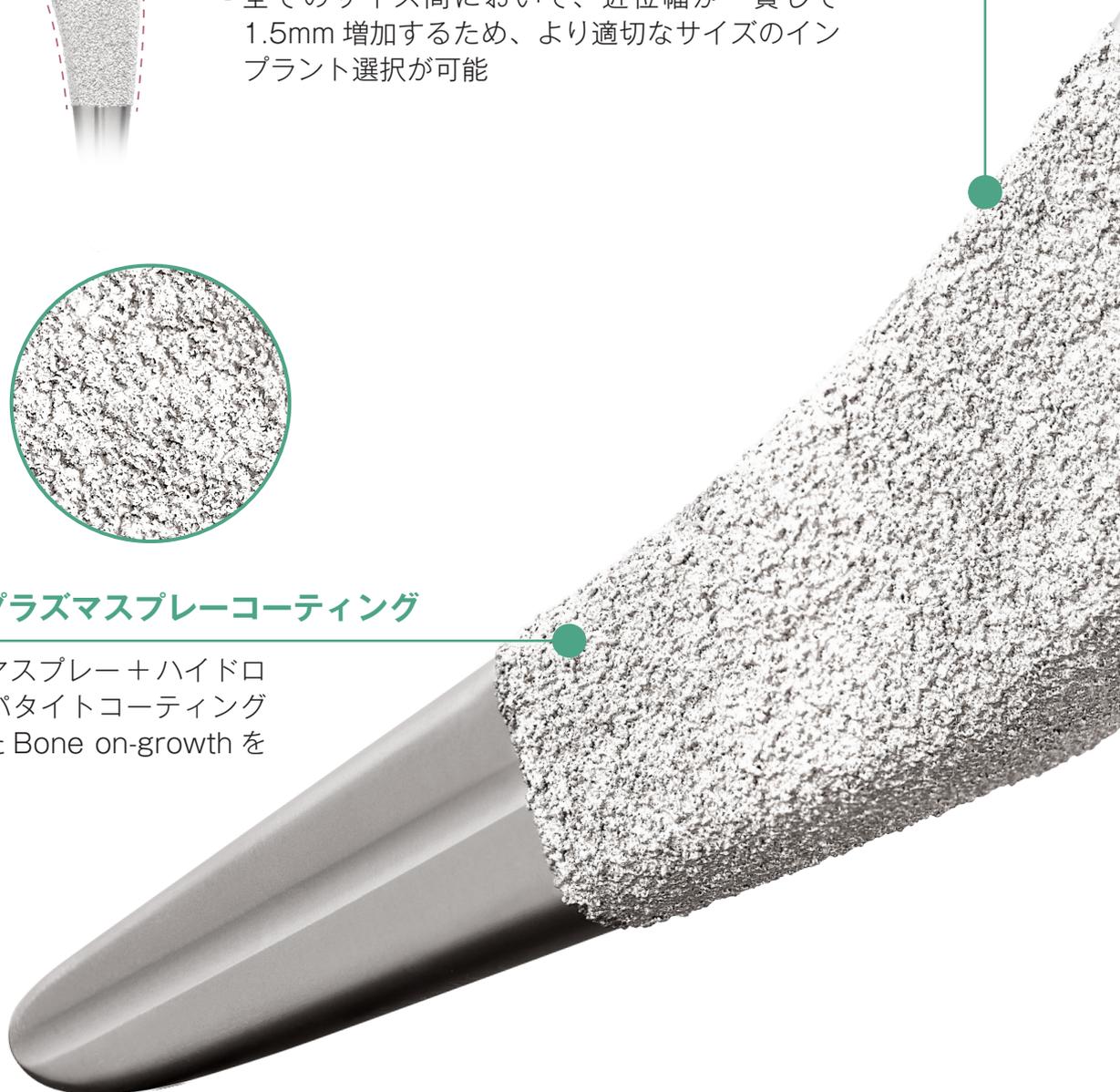

12/14 ネックテーパー

- 全ての United 社の大腿骨ヘッドと適合

スタンダード、および ハイオフセットネックオプション

- 解剖学的なオフセットオプションを提供することで、軟部組織に緊張を促し、術後の股関節の力学的構造を再建



インサージョンホール

- ステムの挿入を容易にするクイックコネクホルダーと接続が可能



骨温存

- 薄型で短いステムデザインのため、大転子部および遠位髓腔の骨温存に優れます。



オーダリングインフォメーション

カタログ番号

ステムサイズ

UTS HA ステム
スタンダード



※ 1106 - 7099	# 00
※ 1106 - 7000	# 0
1106 - 7001	# 1
1106 - 7002	# 2
1106 - 7003	# 3
1106 - 7004	# 4
1106 - 7005	# 5
1106 - 7006	# 6
1106 - 7007	# 7
1106 - 7008	# 8
1106 - 7009	# 9
1106 - 7010	# 10
1106 - 7011	# 11
※ 1106 - 7012	# 12
※ 1106 - 7013	# 13
※ 1106 - 7014	# 14

カタログ番号


ステムサイズ

UTS HA ステム
ハイオフセット



1106 - 7201	# 1
1106 - 7202	# 2
1106 - 7203	# 3
1106 - 7204	# 4
1106 - 7205	# 5
1106 - 7206	# 6
1106 - 7207	# 7
1106 - 7208	# 8
1106 - 7209	# 9
1106 - 7210	# 10
1106 - 7211	# 11
※ 1106 - 7212	# 12
※ 1106 - 7213	# 13
※ 1106 - 7214	# 14

※オプションとなります。

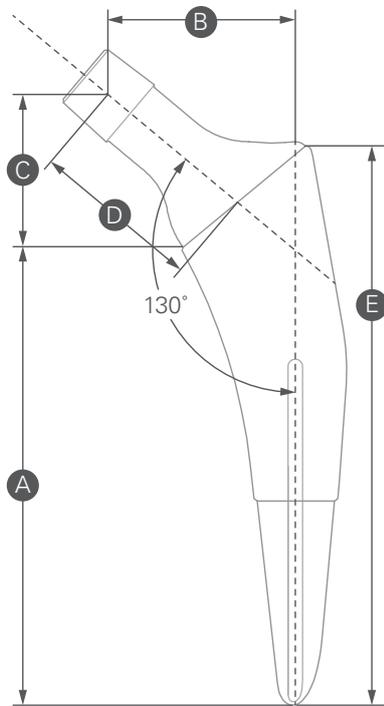

ステムサイズ*	A 内側ステム長	B オフセット	C ネック高さ	D ネック長	E 外側ステム長
スタンダード					
#00	73.5	30	23.9	25.9	91
#0	76.3	31	24.9	27.1	94
#1	77.8	32	25.9	28.3	96
#2	81.4	33	26.9	29.5	100
#3	83.7	34	27.9	30.6	103
#4	85.8	35	28.9	31.8	106
#5	88.0	36	29.9	32.9	109
#6	90.9	37	30.9	34.0	112
#7	93.3	38	31.9	35.1	115
#8	95.6	39	32.9	36.2	118
#9	98.2	40.5	34.2	37.8	121.3
#10	100.7	42	35.4	39.4	124.5
#11	103.3	43.5	36.7	41.0	127.8
#12	105.9	45	37.9	42.6	131
#13	108.3	46.5	39.2	44.2	134.3
#14	110.7	48	40.4	45.8	137.5
ハイオフセット					
#1	77.8	39	25.9	32.9	96
#2	81.4	40	26.9	34.0	100
#3	83.7	41	27.9	35.2	103
#4	85.8	42	28.9	36.3	106
#5	88.0	43	29.9	37.5	109
#6	90.9	44	30.9	38.6	112
#7	93.3	45	31.9	39.7	115
#8	95.6	46	32.9	40.8	118
#9	98.2	47.5	34.2	42.4	121.3
#10	100.7	49	35.4	44.0	124.5
#11	103.3	50.5	36.7	45.6	127.8
#12	105.9	52	37.9	47.2	131
#13	108.3	53.5	39.2	48.8	134.3
#14	110.7	55	40.4	50.3	137.5

単位 :mm

販売名：UTS HA+TPS フェモラルステム
承認番号：30300BZX00115000



© 2021 United Orthopedic Japan Inc.

製造販売元

ユナイテッド・オーソペディック・ジャパン株式会社
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい5-1-2
横浜シンフォステージ ウエストタワー10階
TEL 045-620-0741 FAX 045-620-0742

Unitedロジスティクスセンター  045-620-3415

販売店

202602(3)R1

